

Jackson-Pratt Desagüe Instrucciones para el cuidado del hogar

Un drenaje de Jackson-Pratt se ha colocado durante su cirugía hoy. Este pequeño tubo elimina la sangre y otros fluidos en un dispositivo de recolección. Esto ayuda a curar y reduce el riesgo de hinchazón, formación de hematomas e infección. Espere ver fluidos y sangre en el desagüe. El tubo se cose en su lugar para que usted pueda sentir un tirón suave y una sensación de ardor en el sitio de inserción.

- Evite dormir en el mismo lado que el desagüe.
- Asegure el tubo a su ropa para evitar el desprendimiento. Un perno de seguridad asegurado con cinta de tela y sujeto a la ropa funciona bien.
- Mantenga el sitio de drenaje e inserción limpio y seco. Los baños de esponja se prefieren hasta que el drenaje se elimina.


CÓMO VACIAR SU DRENAJE

- Vacíe su desagüe cada 24 horas o cuando la cámara de recolección esté casi llena
 1. Lávese las manos.
 2. Levante el tapón y la bombilla se expandirá.
 3. Gire el drenaje boca abajo y vacíelo en un vaso medidor.
 4. Pase el bulbo desde la parte inferior hacia el extremo del tapón, o exprima hasta que el bulbo esté plano.
 5. Asegure el tapón.
 6. Enjuague el drenaje en el inodoro.
 7. Lávese las manos.

Registre la cantidad de drenaje en el registro de drenaje y traiga esta información con usted a su cita de seguimiento.

Cuándo llamar a su médico (Llame al 208-367-3320 para comunicarse con su médico)

- El tubo se desprende o se extrae completamente.
- Las puntadas que sostienen el tubo se sueltan o faltan.
- Enrojecimiento o calor alrededor del sitio.
- Fiebre superior a 101 durante 24 horas.
- Un aumento en el drenaje después de una disminución inicial.
- El drenaje está nublado o tiene un mal olor.

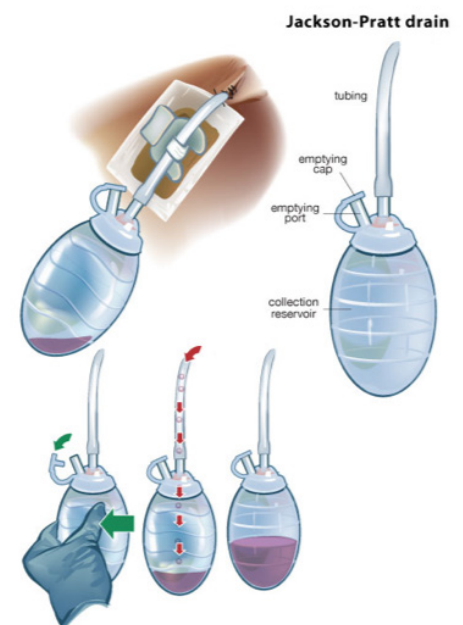

Registro de drenaje

| Fecha | Hora | Cantidad (mls o cc) |
|-------|------|---------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Notes: